

PROCEDIMENTO PARA REALIZAR ELETROCARDIOGRAMA



Marcello Allexandre Oliveira Carvalho
Enfermeiro

Colocação dos Eletrodos

Derivações Precordiais

V1: Quarto espaço intercostal na borda direita do esterno


V2: Quarto espaço intercostal na borda esquerda do esterno

V3: Espaço intermediário entre V2 e V4


V4: Quinto espaço intercostal na linha média clavicular

V5: Quinto espaço intercostal na linha axilar anterior

V6: Quinto espaço intercostal na linha axilar média

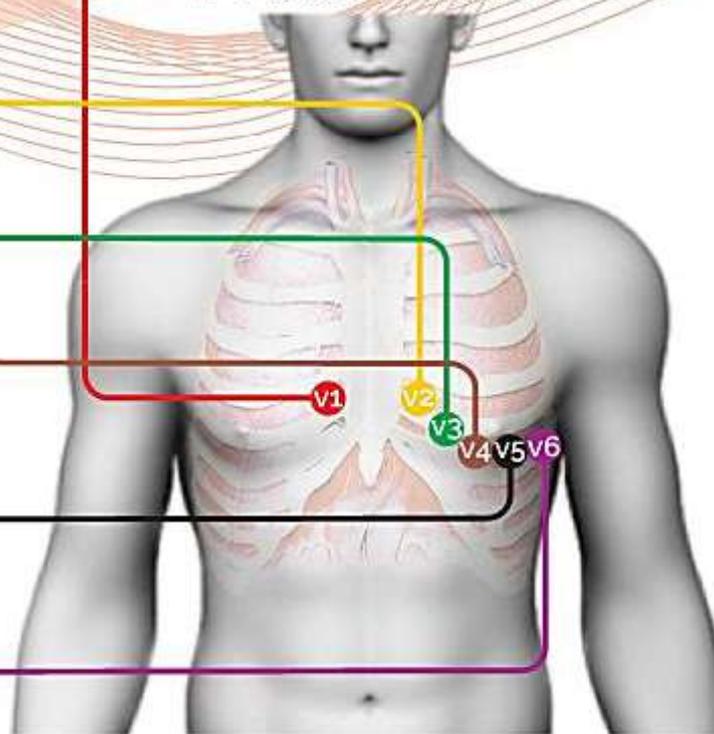

Derivações Periféricas

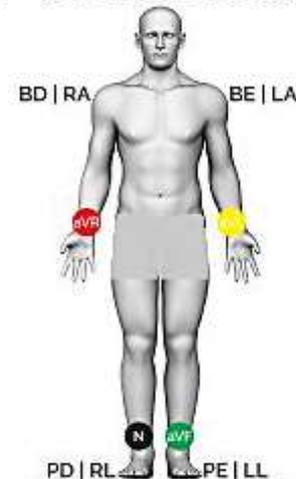


Vermelho: Braço Direito | Right Arm


Amarelo: Braço Esquerdo | Left Arm

Preto: Perna Direita | Right Leg

Verde: Perna Esquerda | Left Leg


*Padrão de Cores Europeu

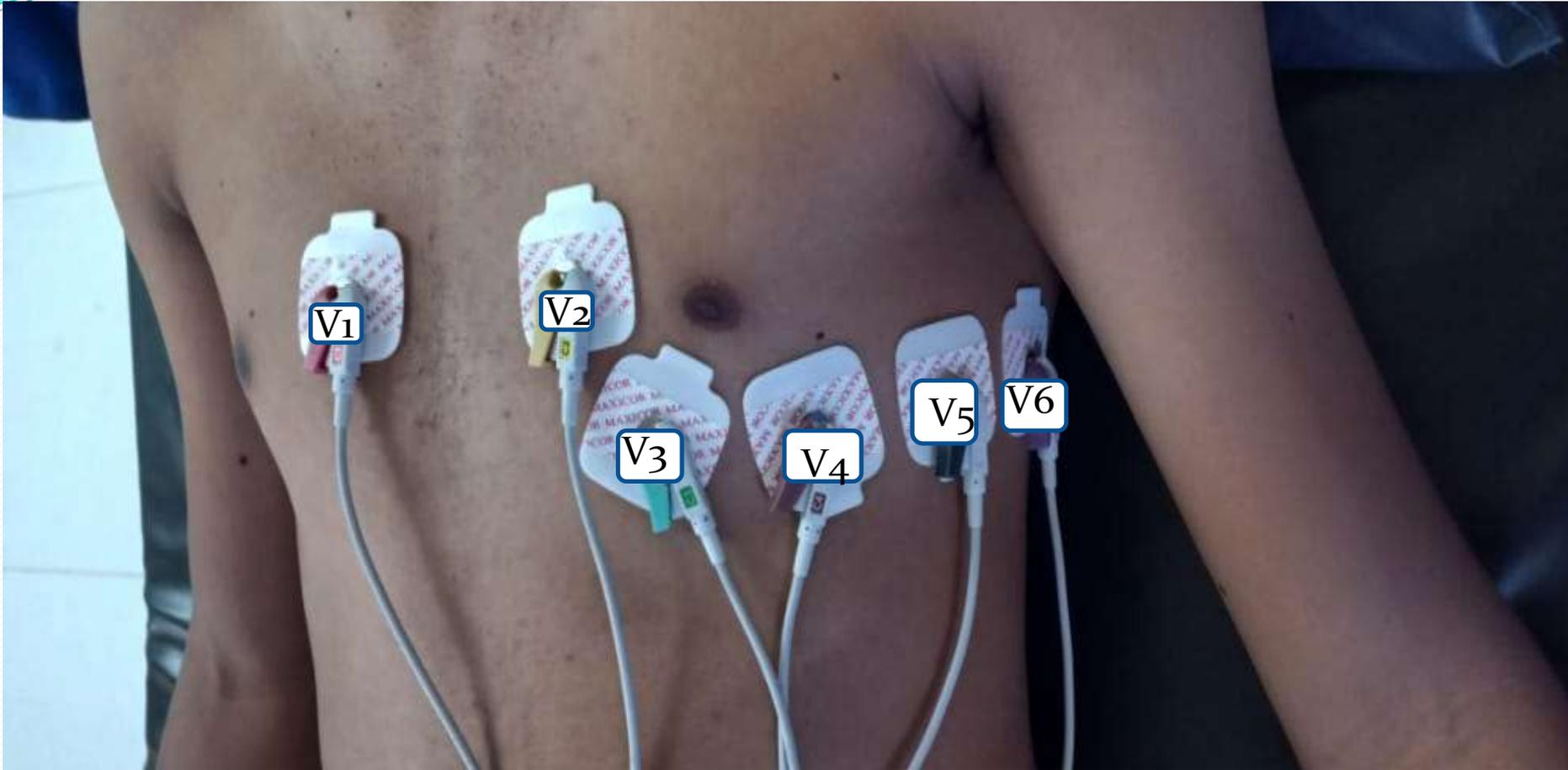

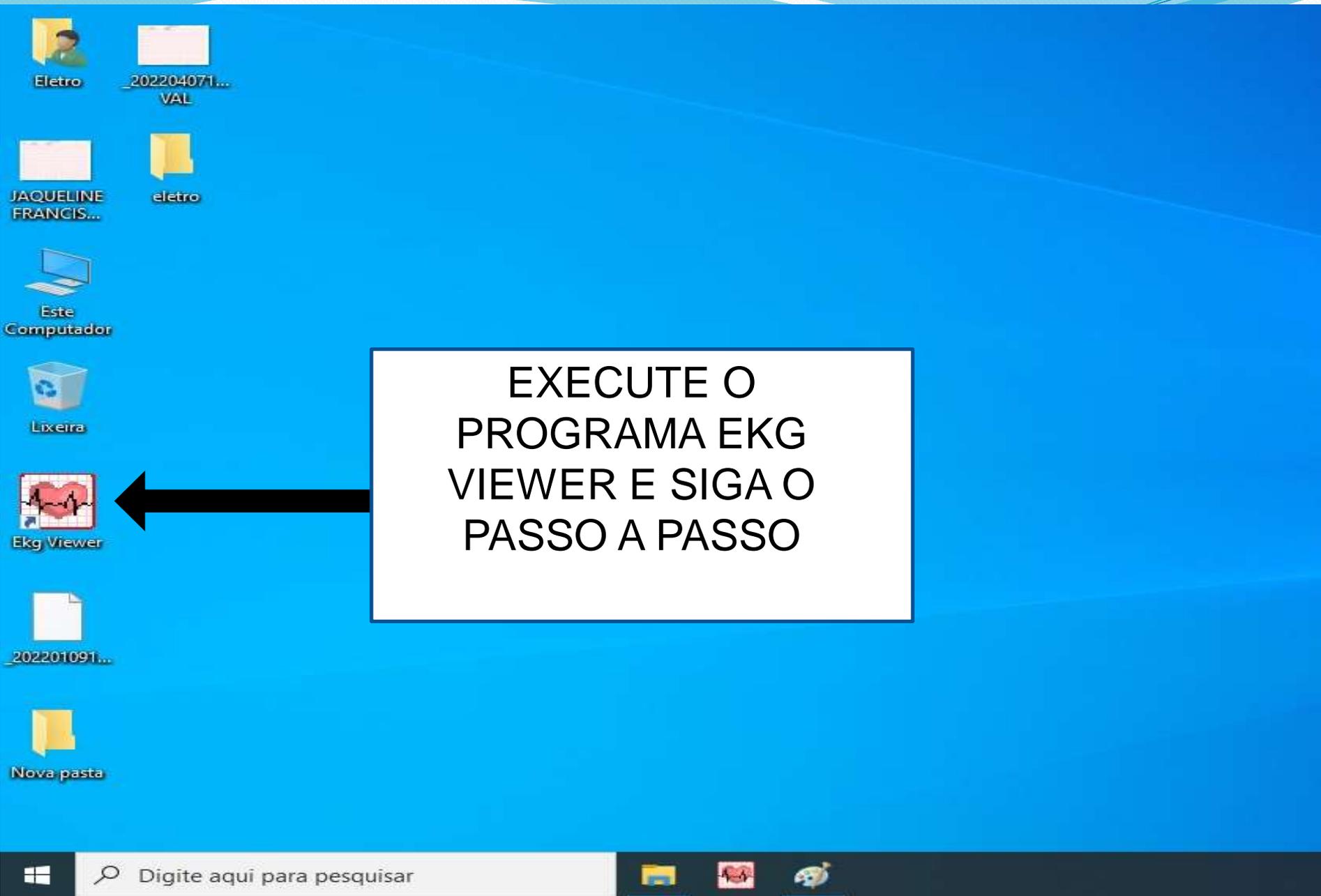

EXECUTE O
PROGRAMA EKG
VIEWER E SIGA O
PASSO A PASSO



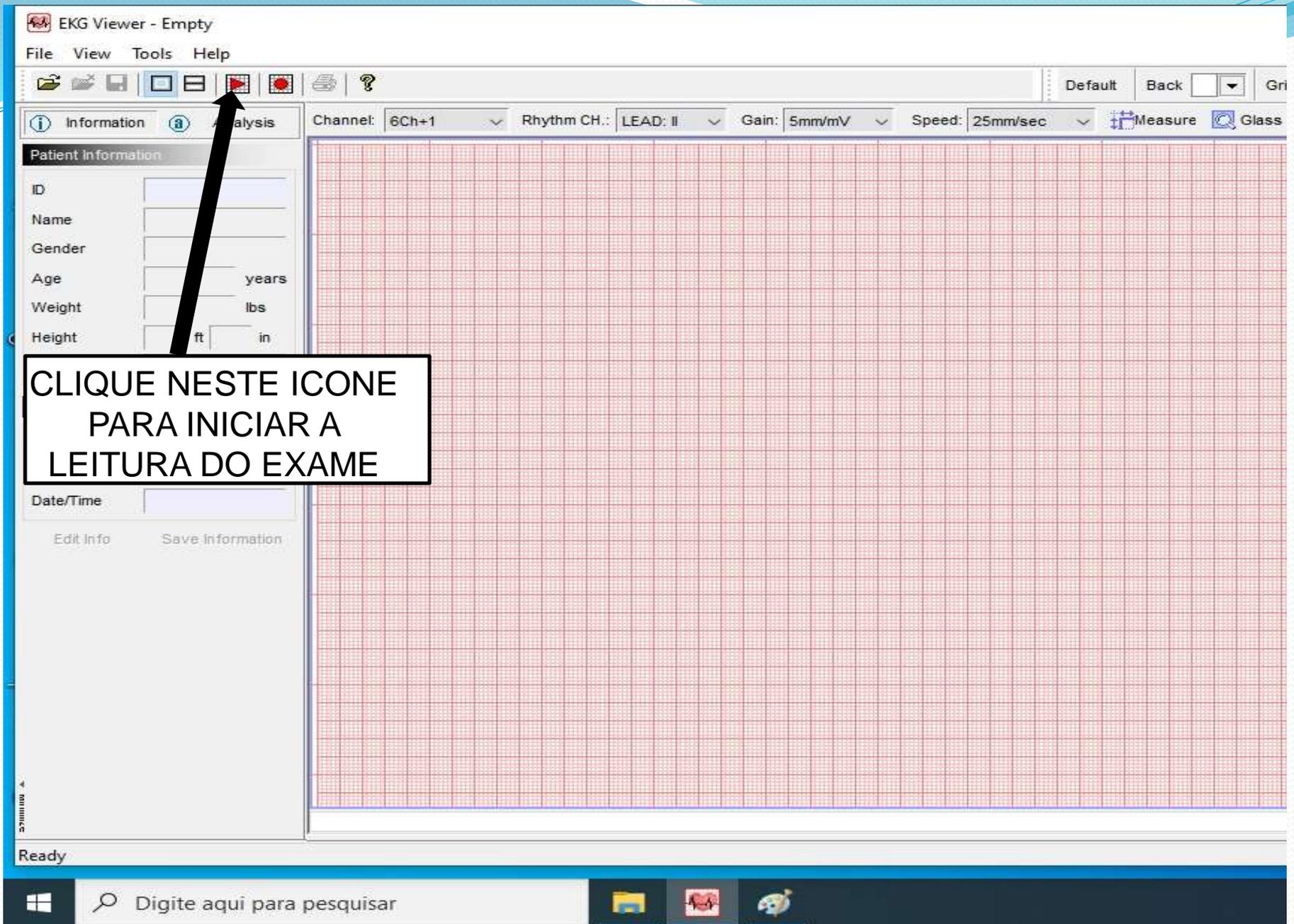

CLIQUE NESTE ICONE
PARA INICIAR A
LEITURA DO EXAME

The image shows a screenshot of the 'EKG Viewer - Empty' software interface. On the left, there is a 'Patient Information' form with fields for ID, Name, Gender, Age (years), Weight (lbs), Height (ft/in), and History. Below this is a 'Misc' section with fields for Doctor, Hospital, and Date/Time, along with 'Edit Info' and 'Save Information' buttons. The main area displays a 12-lead ECG trace with leads labeled I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, and V6. A red vertical line is positioned at the beginning of the trace. A black arrow points from a red square button in the top toolbar to the text box. The text box contains the following instructions: 'AGUARDE 30 SEGUNDOS PARA REALIZAR A CAPTURA DO TRAÇADO OU ATE ESTABILIZAR O MESMO. CLIQUE NOVAMENTE NESTE BOTÃO'. The software interface also includes a menu bar (File, View, Tools, Help), a toolbar with various icons, and a status bar at the bottom with 'Start EKG Monitor.' and a Windows taskbar at the very bottom.

AGUARDE 30 SEGUNDOS
PARA REALIZAR A
CAPTURA DO TRAÇADO
OU ATE ESTABILIZAR O
MESMO. CLIQUE
NOVAMENTE NESTE
BOTÃO



Digite aqui para pesquisar



2



Patient Information

ID

Name


Gender

Doctor


Hospital


Date/Time

Edit Info Save Information

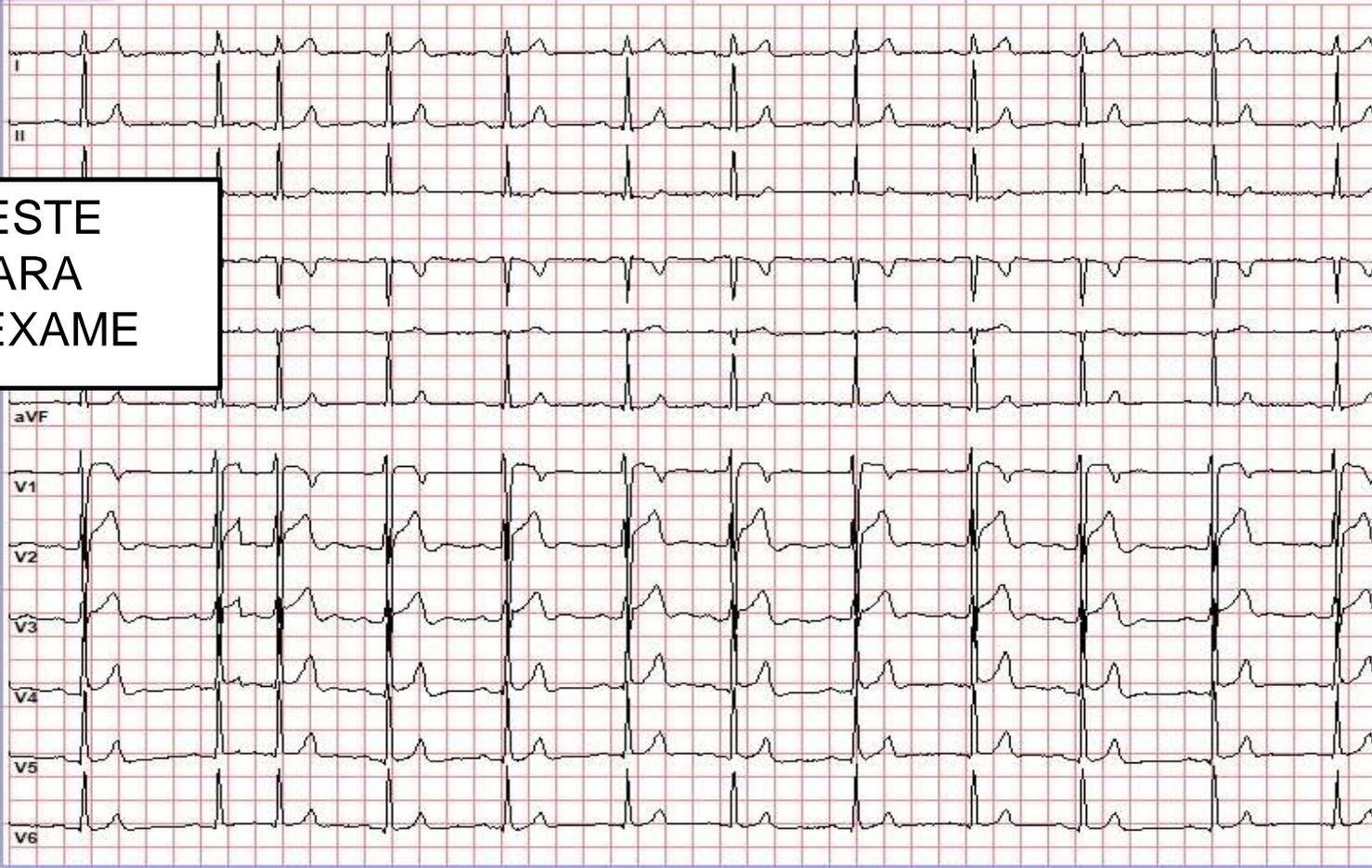

CLIQUE NESTE BOTÃO PARA GRAVAR O EXAME

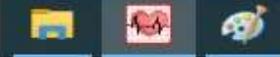

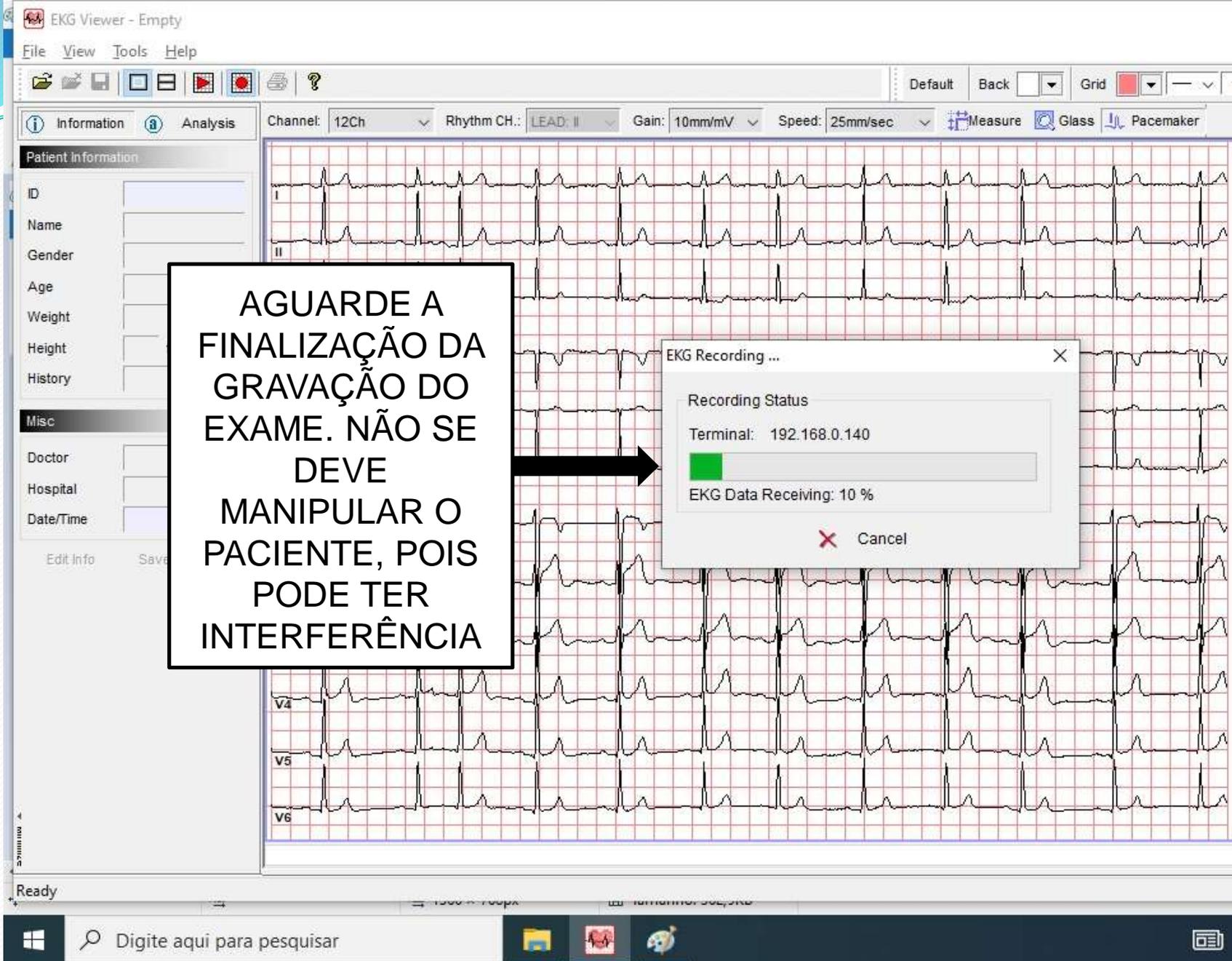

**AGUARDE A
FINALIZAÇÃO DA
GRAVAÇÃO DO
EXAME. NÃO SE
DEVE
MANIPULAR O
PACIENTE, POIS
PODE TER
INTERFERÊNCIA**


EKG Recording ...

Recording Status

Terminal: 192.168.0.140

EKG Data Receiving: 10 %

Cancel

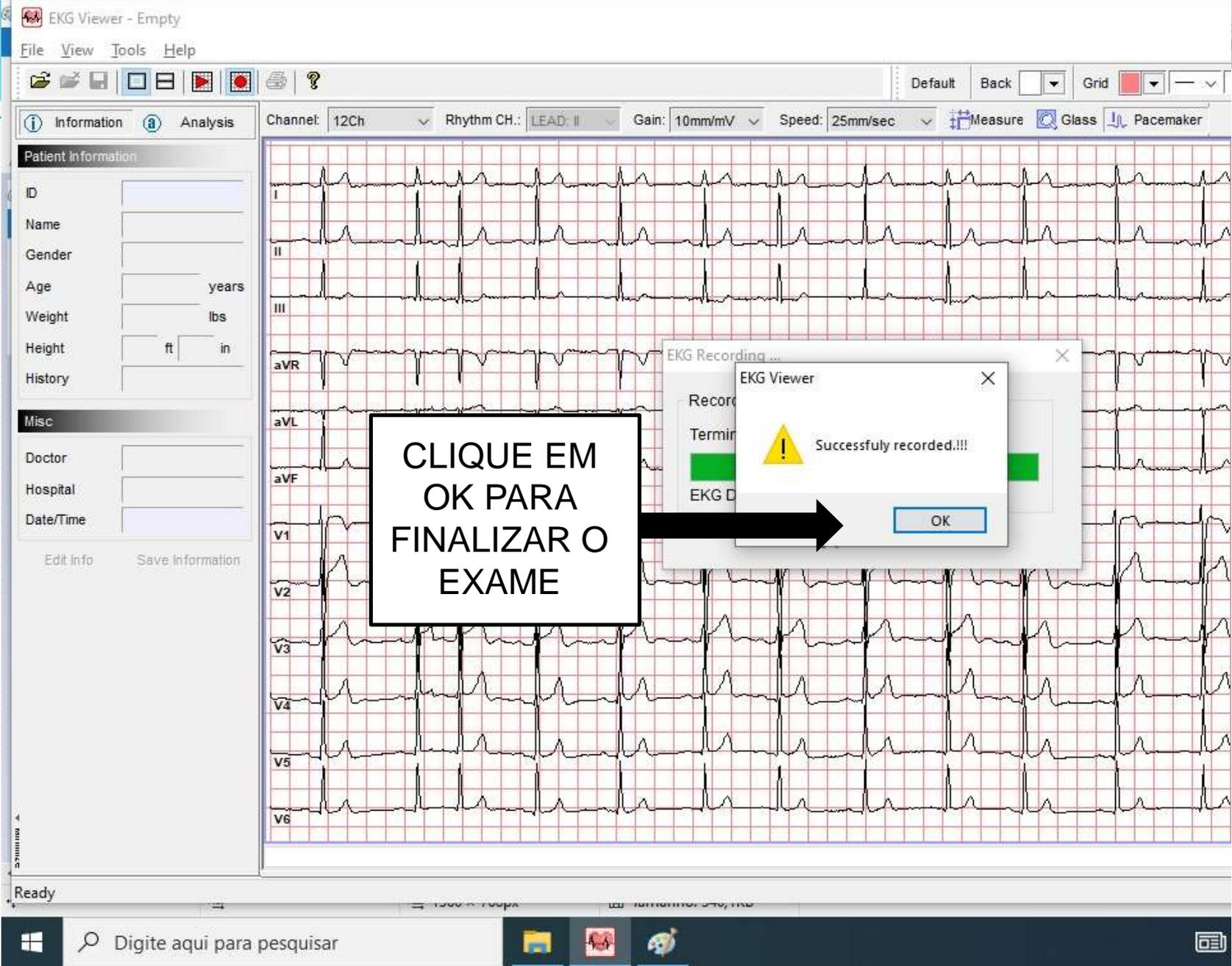

Patient Information

ID

Name

Gender

Age years

Weight lbs

Height ft in

History


Misc

Doctor

Hospital

Date/Time

Edit Info Save Information

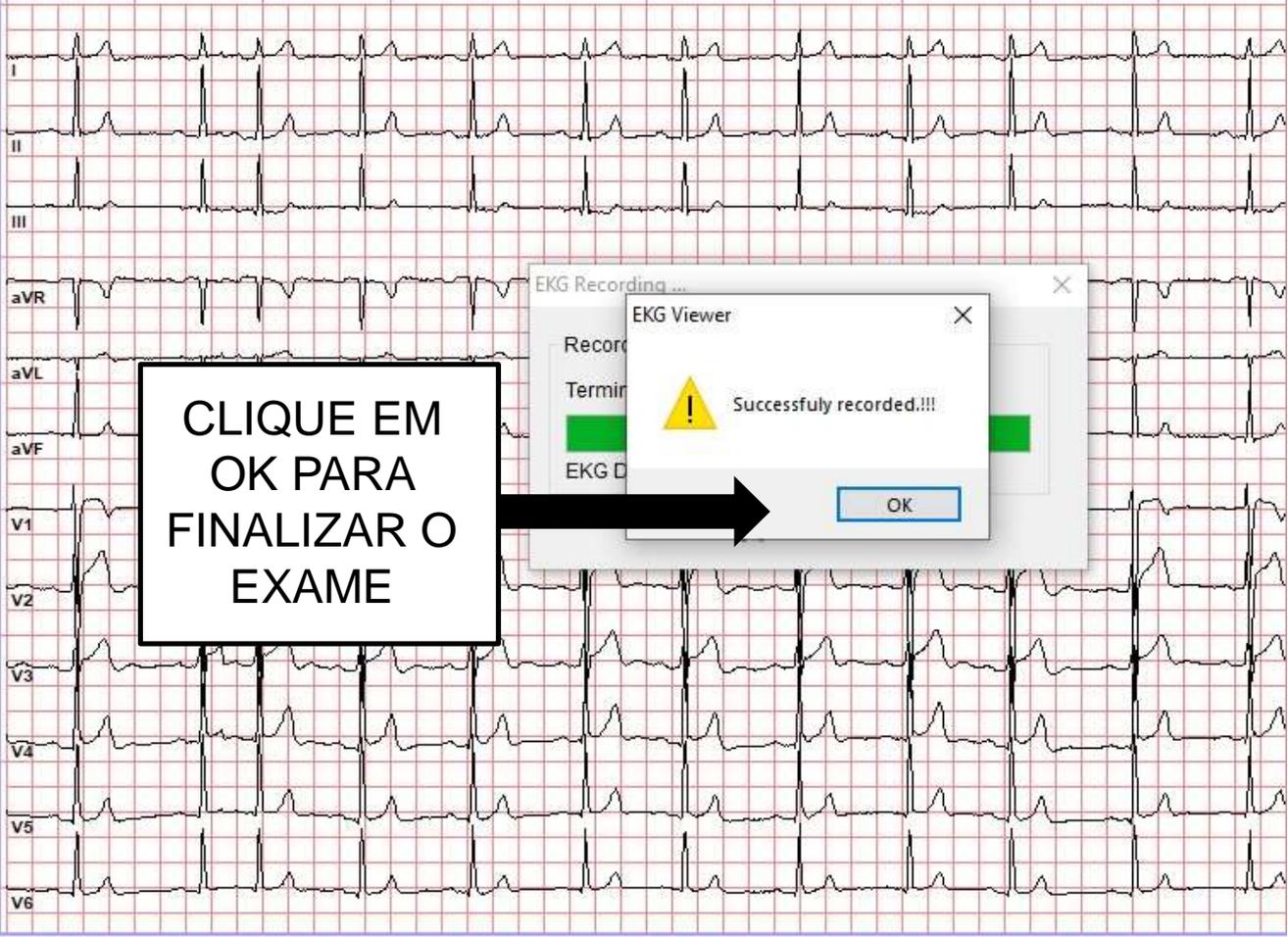

**CLIQUE EM
OK PARA
FINALIZAR O
EXAME**

EKG Recording ...

EKG Viewer


Record

Termin

EKG D

Successfully recorded!!!

OK

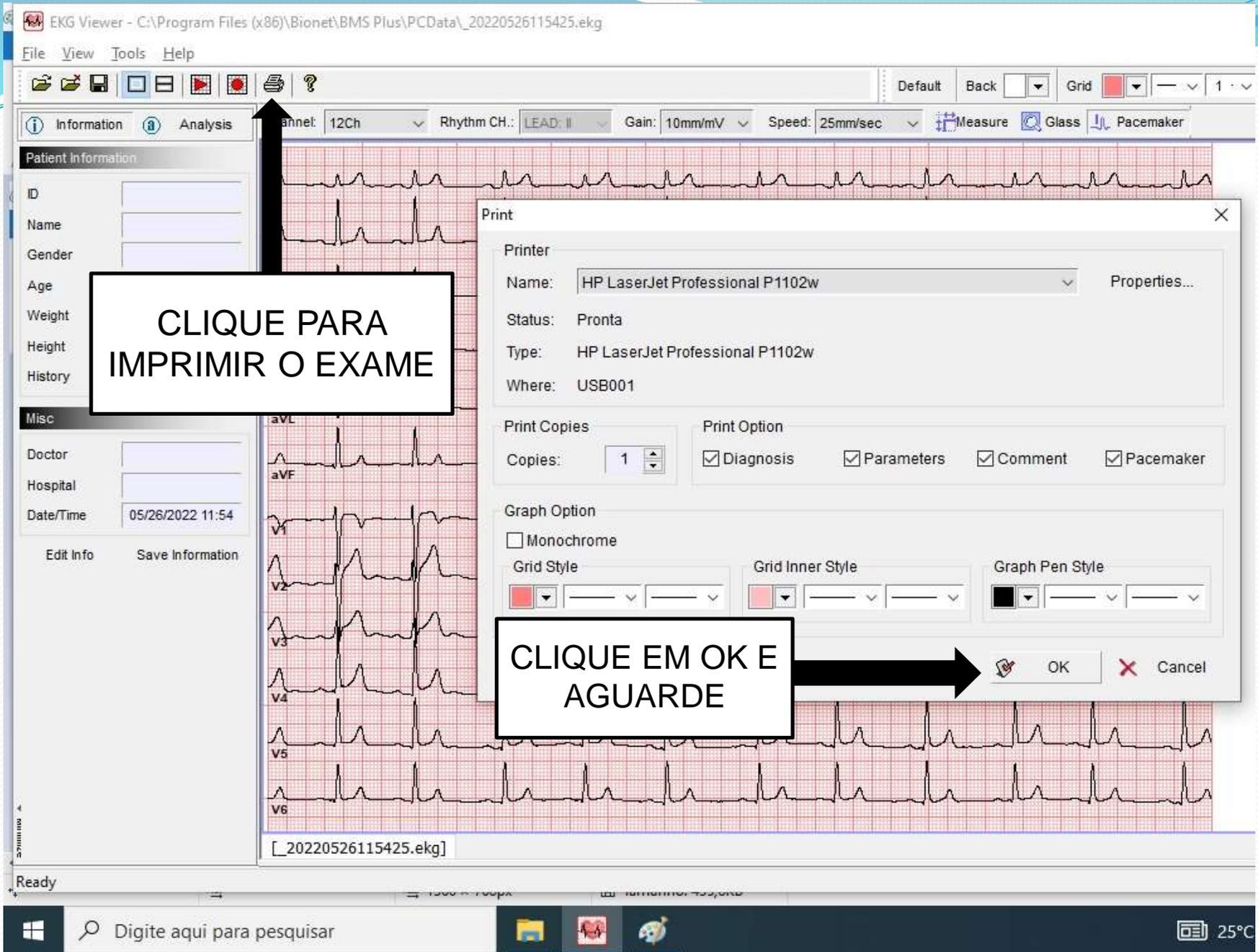

CLIQUE PARA IMPRIMIR O EXAME

CLIQUE EM OK E AGUARDE

EKG Viewer - Empty

File View Tools Help

Information Ana Start Monitor 12Ch Rhythm CH.: LEAD: II Gain: 10mm/mV Speed: 25mm/sec

Patient Information

ID

Name

Gender

Age years

Weight lbs

Height ft in

History

Misc

Doctor

Hospital

Date/Time

Edit Info Save Information

Start EKG Monitor.

NUM

Digite aqui para pesquisar

25°C Panc. de chuva

POR 11:53
PTB2 26/05/2022

**FECHE O PROGRAMA,
DESLIGUE O
COMPUTADOR E
ORGANIZE O MATERIAL
UTILIZADO**

The image features a blue-tinted illustration of a human torso from the back, with a glowing, anatomically detailed heart visible in the chest area. A bright blue ECG (heart rate) line is superimposed over the torso, extending from the heart towards the right side of the frame. The background is a dark blue gradient with subtle light effects and a faint grid pattern.

NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR O
EXAME COM NOME COMPLETO DO
PACIENTE, DATA E HORÁRIO DE
REALIZAÇÃO

REFERÊNCIAS

- ECG. MANUAL PRÁTICO DE ELETROCARDIOGRAMA. Disponível em <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/http://ole.uff.br/wp-content/uploads/sites/419/2019/04/ECG-Manual-Pr%C3%A1tico-de-Eletrocardiograma-HCor.pdf> Acessado em 26/05/2022.